

# Rat IL-6 ELISA 试剂盒

产品编号# CRE0005 (48/96 孔)

适用于大鼠血清、血浆或细胞培养上清液等样本

仅供研究，不用于临床诊断。



客服热线: 400-7060-959 \* 技术支持邮箱: [tech@4abio.com](mailto:tech@4abio.com)  
公司官网: [www.4abio.net](http://www.4abio.net)

## 目录

简介 .....	- 3 -
检测原理 .....	- 3 -
试剂盒组分 .....	- 4 -
储存条件 .....	- 5 -
其他实验材料（不提供，但可协助购买）： .....	- 5 -
注意事项 .....	- 5 -
样本收集处理及保存方法 .....	- 6 -
试剂准备 .....	- 6 -
操作步骤 .....	- 8 -
操作流程图 .....	- 8 -
操作要点提示 .....	- 8 -
结果判断 .....	- 9 -
结果重复性 .....	- 9 -
灵敏度 .....	- 10 -
特异性 .....	- 10 -
参考文献 .....	- 10 -

 该产品由北京四正柏生物科技有限公司研制。

 请根据试剂盒中所附说明书指引进行实验。

## 简介

白细胞介素6(IL-6)是一种由淋巴、非淋巴细胞产生的多功能细胞因子。IL-1、TNF、IFN- $\beta$ 、PDGF、LPS、Poly I-C、A23187和PMA等对IL-6的产生具有正调作用。1980年发现成纤维细胞经Poly I-C刺激后能产生一种抑制病毒复制的细胞因子，称为 $\beta$ 2干扰素(IFN- $\beta$ 2)。以后的研究结果未能证实这种因子的直接抗病毒作用，但具有其它多方面的生物学功能，根据实验系统和功能的不同，被命名为杂交瘤/浆细胞瘤生长因子，B细胞分化因子，B细胞刺激因子2，肝细胞刺激因子等。1986年统一命名IL-6。

大鼠IL-6的cDNA序列有211个氨基酸残基，含有两个潜在的N糖基化位点。成熟大鼠IL-6由疏水N末端24个氨基酸残基信号肽裂解产生，含187氨基酸残基。小鼠、大鼠和人的IL-6cDNA序列克隆均已获得。在蛋白质序列水平上，大鼠IL-6与人IL-6具有39%的同源性，与小鼠IL-6有87%相同。人的IL-6对小鼠某些细胞有刺激作用，但小鼠的IL-6对人的细胞没有活性。IL-6与G-CSF和IFN- $\beta$ 有较高同源性，对骨髓造血细胞和髓样白血病细胞的某些作用也有相似之处。


IL-6由多种细胞产生，对免疫应答、急性期反应、造血和神经系统有多方面作用。IL-6的生物学活性主要包括6个方面：调节免疫应答、调节造血系统、诱导急性期蛋白、调节肿瘤生长、调节神经内分泌系统和其它。

- 1) 调节免疫应答：诱导B细胞分化和产生抗体，诱导T细胞表达IL-2受体和产生IL-2，诱导T细胞活化增殖和分化、激素，保护神经原抵抗毒CTL分化。
- 2) 调节造血系统：诱导造血干细胞生长，诱导巨核细胞成熟。
- 3) 诱导急性期蛋白，诱导多种急性期蛋白合成和分泌。加速肝细胞急性期蛋白的合成。
- 4) 调节肿瘤细胞生长，促进或抑制肿瘤细胞生长。
- 5) 调节神经内分泌系统：诱导神经细胞分化、支持细胞存活，诱导神经内分泌细胞产生性物质，促进神经重建。
- 6) 其它作用：促进中性粒细胞分化、活化或骨细胞，促进角质细胞、肾小球细胞生长，诱导ACTH合成，结合HBV包膜蛋白。

IL-6与临床上多种疾病的发生均有关系。与自身免疫性疾病，肿瘤均有密切的关系。IL-1和TNF- $\alpha$ 对IL-6引起的病理损伤可能有协同作用。应用IL-6治疗放疗、化疗所致血小板减少症，癌症以及作为疫苗佐剂已进入临床试验。

## 检测原理

本实验采用双抗体夹心 ELISA。用抗大鼠 IL-6 单克隆抗体预包被酶标板，加入适度稀释的样本和标准品，其中的 IL-6 会与其单抗结合，洗去游离成分；加入生物素化的抗大鼠 IL-6 抗体，抗大鼠 IL-6 抗体与结合在单抗上的大鼠 IL-6 结合而形成免疫复合物，洗去游离的成分；加入辣根过氧化物酶标记的亲合素，生物素与亲合素特异性结合，洗去未结合的酶结合物；加入显色剂，若反应孔中有 IL-6，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色；加终止液变黄。在 450nm 下测 OD 值，IL-6 浓度与 OD450 值之间呈正比，可通过绘制标准曲线计算出标本中 IL-6 浓度。

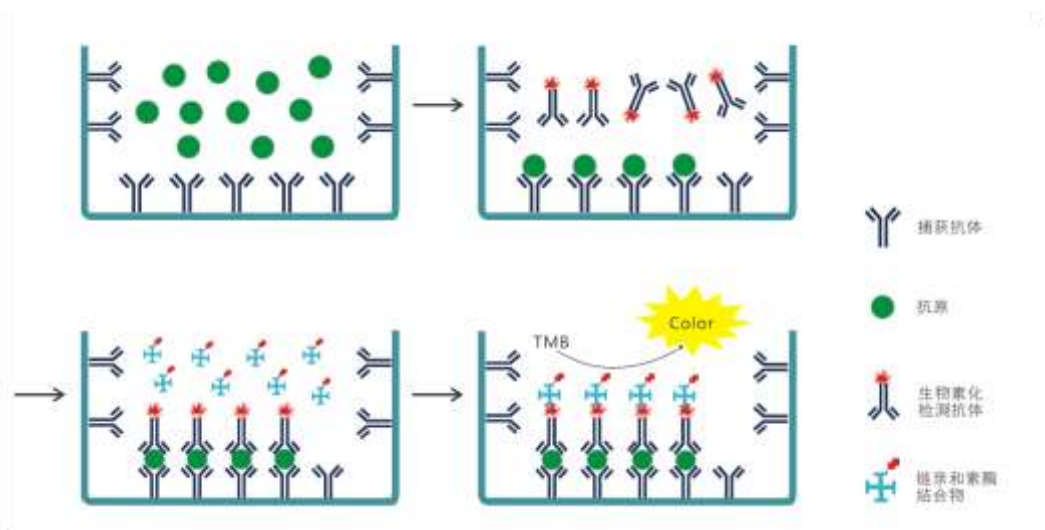

检测原理示意图

## 试剂盒组分

试剂盒组分	96 孔	48 孔	配制
1a 标准品	2 支	1 支	按说明书进行稀释
1b 标准品和标本稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
2a 浓缩生物素化抗体	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
2b 生物素化抗体稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
3a 浓缩酶结合物 (避光)	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
3b 酶结合物稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
4 浓缩洗涤液 20×	1 瓶	1 瓶	按瓶签标识进行稀释
显色剂 (避光)	1 瓶	1 瓶	即用型
终止液	1 瓶	1 瓶	即用型
抗体包被板条	8×12	8×6	即用型
封板胶纸	4 张	2 张	即用型
说明书	1 份	1 份	

如果您收到试剂盒后发现上表中有任何组分破损或缺失,请及时联系我司客服 400-7060-959 或 [tech@4abio.com](mailto:tech@4abio.com)。我们将及时为您解决相关问题。

## 储存条件

未启封的试剂盒	4℃保存，请于保质期内使用。	
已启封或重新溶解的试剂	1b 标准品和标本稀释液	可以整盒放入 4℃储存 1 个月。 2a 浓缩生物素化抗体和 3a 浓缩酶结合物需用现配。
	2a 浓缩生物素化抗体 (100×)	
	2b 生物素化抗体稀释液	
	3a 浓缩酶结合物 (避光 100×)	
	3b 酶结合物稀释液	
	4 浓缩洗涤液 20×	
	显色剂 (避光)	
	终止液	4℃或常温保存
	标准品	重溶后分装，-20℃存放一个月，避免反复冻融。稀释后的标准品使用后应丢弃，不得重复使用。
抗体包被板条	实验中不用的板条应立即放回包装袋中，密封干燥 4℃保存。	

以上储存条件均要求在试剂盒保质期内。

## 其他实验材料 (不提供, 但可协助购买):

1. 酶标仪(450nm)
2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000 $\mu$ l; 一次检测样品较多时, 最好用多通道移液器。
3. 自动洗板机或洗瓶
4. 37℃温箱
5. 双蒸水或去离子水
6. 坐标纸
7. 量筒

## 注意事项

1. 试剂盒保存在2-8℃, 除复溶后的标准品, 其它成分不可冷冻。
2. 浓缩生物素化抗体(2a)、浓缩酶结合物(3a)装量极少, 运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. 为避免交叉污染请使用一次性吸头。
4. 终止液和显色剂具腐蚀性, 避免皮肤及粘膜直接接触, 一旦接触到这些液体, 请尽快用大量水冲洗。
5. 使用干净的塑料容器配制洗涤液, 使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
6. 洗涤酶标板时应充分拍干, 不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
7. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分, 不同批号的试剂盒组份不能混用, 请在有效日期内使用本产品。

8. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。
9. 充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
10. 避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。
11. 适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100, 1:10, 1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。
12. 标准品稀释液、操作人、移液方式、洗涤方法、孵育时间及温度、试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
13. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。


## 样本收集处理及保存方法

1. **血清**：使用不含热原和内毒素的试管，收集血液后，室温凝血30min，1000×g离心10min，小心分离血清。
2. **血浆**：用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆，收集后30min内以1000×g离心15min去除颗粒。
3. **细胞上清液**：1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。
4. **保存**：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃—70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
5. **稀释**：可根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。  
**注：正常大鼠血清或血浆样本建议做1:2稀释。**

## 试剂准备

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
2. **洗涤缓冲液**：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。
3. **标准品**：加入标准品/标本稀释液(1b)1ml 至冻干标准品(1a)中，待彻底溶解后，静置 15 分钟混匀(浓度为4000pg/ml)，然后根据需要进行稀释，见下图(建议标准曲线使用以下浓度：4000、2000、1000、500、250、125、62.5、0 pg/ml)。稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其放在-20~-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。

标准品稀释方法：

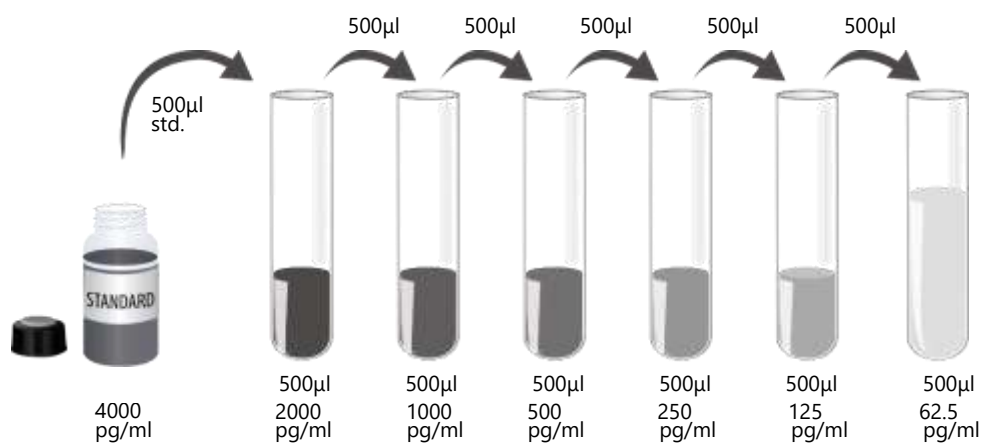

4. **生物素化抗体工作液：**根据每孔需要100µl来计算总的用量，多配制100-200µl。以生物素化抗体稀释液(2b)稀释浓缩生物素化抗体(2a)(1:100)。最好现用现配。（稀释方法见下表）

所用板条数	浓缩生物素化抗体	生物素化抗体稀释液
12	110µL	+ 10890µL
10	90µL	+ 8910µL
8	70µL	+ 6930µL
6	50µL	+ 4950µL
4	33µL	+ 3267µL
2	17µL	+ 1683µL
1	9µL	+ 891µL


5. **酶结合物工作液：**以酶结合物稀释液(3b)稀释浓缩酶结合物(3a)(1:100)。最好现用现配。（稀释方法见下表）

所用板条数	浓缩酶结合物	酶结合物稀释液
12	110µL	+ 10890µL
10	90µL	+ 8910µL
8	70µL	+ 6930µL
6	50µL	+ 4950µL
4	33µL	+ 3267µL
2	17µL	+ 1683µL
1	9µL	+ 891µL

## 操作步骤

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。
2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100 $\mu$ l /孔)加入相应孔中（零孔只加标准品/样本稀释液），用封板胶纸封住反应孔，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育90分钟（空白对照孔除外）。
3. 洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 $\mu$ l，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350 $\mu$ l，静置30秒后甩尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。
4. 加入生物素化抗体工作液(100 $\mu$ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育60分钟（空白对照孔除外）。
5. 洗板4次。
6. 加入酶结合物工作液(100 $\mu$ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育30分钟（空白对照孔除外）。
7. 洗板4次。
8. 加入显色剂100 $\mu$ l /孔，避光，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育10-20分钟。
9. 加入终止液100 $\mu$ l /孔，混匀后即刻测量OD450值(5分钟内)。

## 操作流程

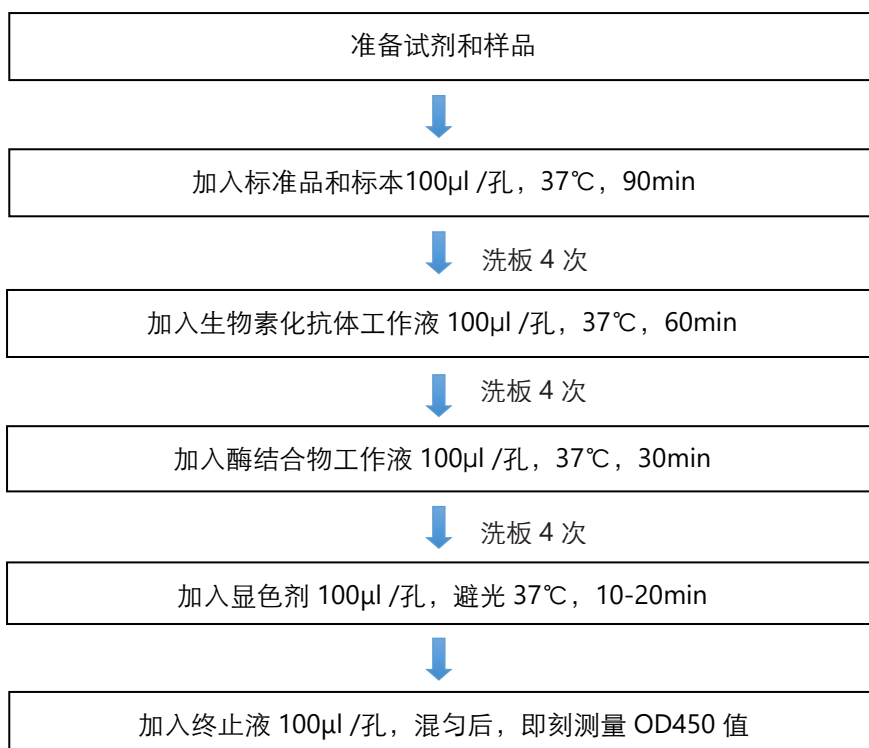

## 操作要点提示

1. 配制各种试剂时要充分混匀，但要避免产生大量泡沫，以免加样时加入大量的气泡，产生加样误差。
2. 为避免交叉污染，在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
3. 为了确保准确的结果，在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。




4. 显色剂在添加之前，应保持无色，请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要，肉眼可见前 3-4 孔有梯度蓝色，后 3-4 孔差别不明显，零孔无蓝色出现即可终止。
5. 每次检测均要做标准曲线，根据样品待测因子的含量，适当稀释或浓缩样本，最好做预实验。

## 结果判断

1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值，如果做复孔，求其平均值。
2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y)，相应的标准品浓度为横坐标(X)，生成相应的标准曲线，样品待检物含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
3. 若标本 OD 值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
4. 参考数据：

标准品浓度(pg/ml)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.061	0.058	0.060	—
62.5	0.082	0.087	0.085	0.078
125	0.108	0.113	0.111	0.103
250	0.150	0.145	0.148	0.166
500	0.325	0.328	0.327	0.323
1000	0.689	0.694	0.692	0.688
2000	1.380	1.389	1.385	1.388
4000	2.356	2.359	2.358	2.357

数据仅供参考，不同用户最佳显色时间会有所不同

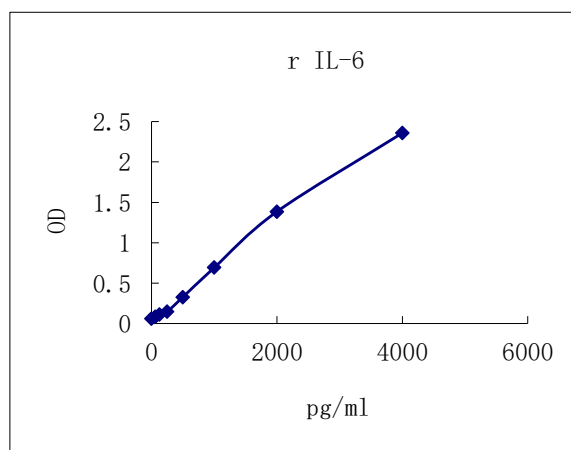

本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线为准

## 结果重复性

板间，板内变异系数均<10%。

## 灵敏度

最低检测大鼠 IL-6 剂量小于 32 pg/ml。最低检出量测定方法：20 个零标准的平均 OD 值增加两个标准差，再计算相应的浓度。

## 特异性

此试剂盒可检测天然和重组的大鼠 IL-6，以 50ng/ml 平行做特异性试验，均不与下列细胞因子及蛋白反应。

重组大鼠细胞因子	重组人细胞因子	重组小鼠细胞因子
CINC-1	IL-6	IL-6
GDNF	IL-6sR	
GM-CSF		
IFN- $\gamma$		
$\beta$ -NGF		
PDGF-BB		
TNF- $\alpha$		
IL-1 $\alpha$		
IL-1 $\beta$		
IL-2		
IL-4		
IL-10		
IL-18		

## 参考文献

1. Chiu, C-P. et al. (1988) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:7099.
2. Northemann, W. et al. (1989) J. Biol. Chem. 264:16072.
3. Hirano, T. et al. (1986) Nature 324:73.
4. Van Snick, J. et al. (1988) Eur. J. Immunol. 18:193.
5. Northemann, W. et al. (1989) J. Biol. Chem. 264:16072.
6. Hibi, M. et al. (1996) J Mol. Med. 74:1.
7. Hirano, T. et al. (1994) Stem Cells 12:262.
8. Van Snick, J. et al. (1990) Annu. Rev. Immunol. 8:253.
9. Taga, T. and T. Kishimoto (1997) Annu. Rev. Immunol. 15:797.

10. Hirano, T. (1994) "Interleukin 6" in The Cytokine Handbook 2nd ed. Academic Press, New York, p. 145.
11. Okada, M. et al. (1983) J. Exp. Med. **157**:583.
12. Lotz, M. et al. (1988) J. Exp. Med. **167**:1253.
13. Tosato, G. and S.E. Pike (1988) J. Immunol. **141**:1556.
14. Wong, G.G. et al. (1988) J. Immunol. 140:3040.
15. Leary, A.G. et al. (1988) Blood 71:1759.
16. Bauman, H. et al. (1984) J. Biol. Chem. **259**:7331.
17. Satoh, T. et al. (1988) Mol. Cell. Biol. **8**:3546.
18. Hama, T. et al. (1989) Neurosci. Letts. **104**:340.